




Que signifie pour vous une bonne valeur ?

« Voici comment je définis la valeur : un équipement de qualité qui m'aide à prodiguer des soins à mes patients. Les tables d'examen Ritter répondent parfaitement à mes besoins. Elles sont non seulement rentables mais aussi conviviales pour les patients et durables dans le temps. Les tables d'examen Ritter facilitent mon travail et celui de mon personnel. »

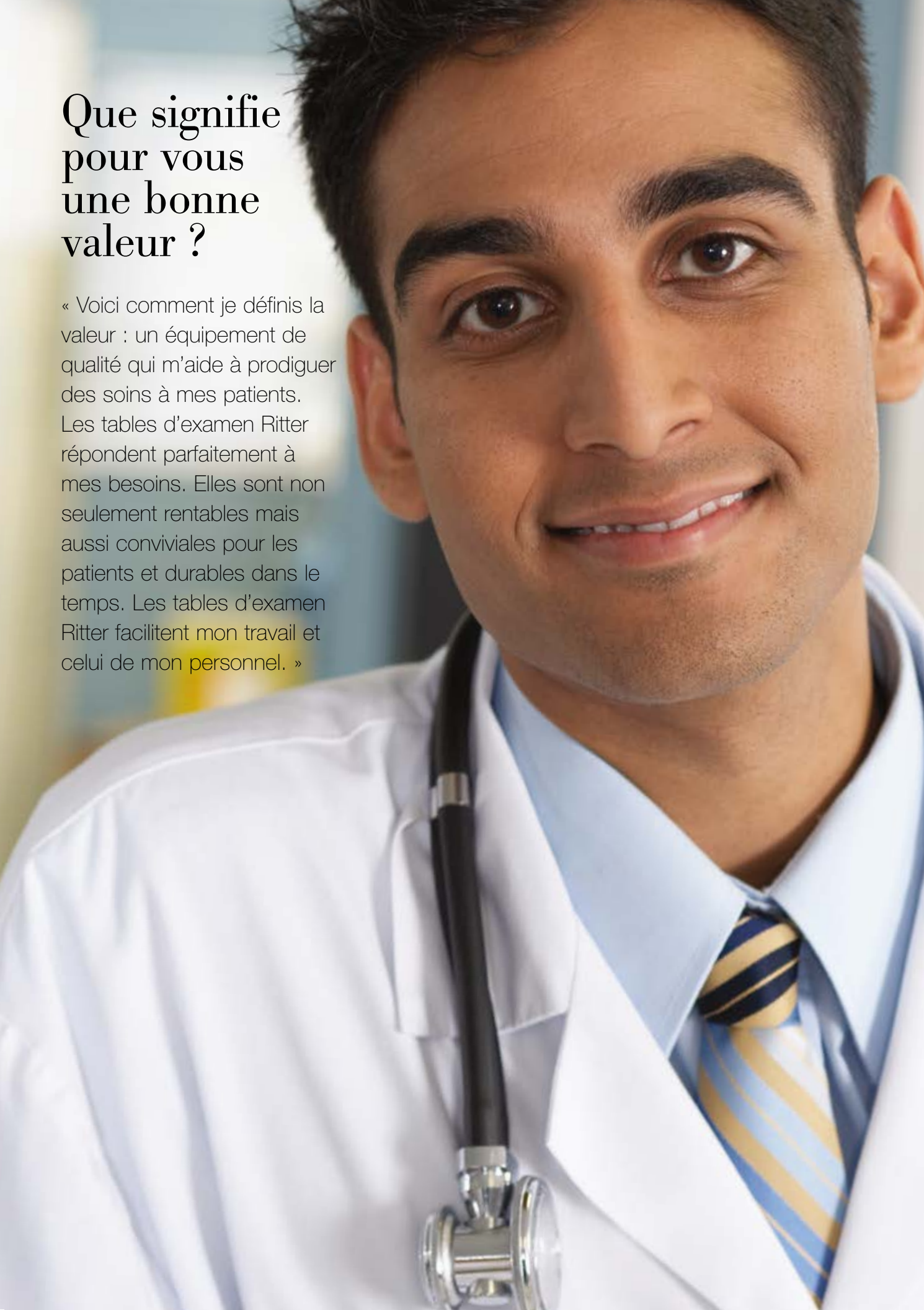

204 Table d'examen manuelle



Nous avons consulté les experts

Pourquoi la marque Ritter est-elle la plus cotée parmi toutes les tables d'examen du marché ? Elle reflète notre volonté de recherche, d'étude et d'écoute afin que nous puissions répondre à vos besoins et à ceux de vos patients.

Vous avez besoin...

- d'une table d'examen facilement accessible aux patients afin qu'ils se sentent en sécurité
- de trois tiroirs latéraux pour une gestion de fournitures optimale
- d'un style moderne coordonné au décor intérieur de votre cabinet
- d'une garniture nouvelle et ergonomique pour assurer le confort de vos patients
- d'une capacité de poids supplémentaire jusqu'à 226,8 kg (500 lb)

Quelle solution proposons-nous ? La table d'examen manuelle Ritter 204 - la dernière innovation en matière de conception, de confort et de fonctionnalité parmi les tables d'examen manuelles.



Tiroirs monobloc

Les tiroirs monobloc sont dotés de coins arrondis faciles à nettoyer et ne possèdent aucun joint afin de contenir tout renversement de liquides et de prévenir la propagation d'infections.


Tiroirs latéraux spacieux - Trois tiroirs latéraux spacieux offrent un espace suffisamment large pour stocker blouses, champs opératoires et autres accessoires mais sont aussi configurés pour l'organisation d'un assortiment de petites fournitures et d'articles en vrac. Deux tiroirs sont aussi disponibles à l'avant pour un accès facile aux fournitures nécessaires aux examens pelviens.



Élégant et facile à nettoyer - Le dessus de garniture sans couture est aussi confortable et doux au toucher qu'il en a l'air pour mettre vos patients à l'aise. L'absence de coutures élimine les endroits où les saletés et les bactéries risquent de s'accumuler, pour assurer un nettoyage facile, rapide et plus efficace.



Dessus de garniture amovible - Le dessus de garniture monobloc se retire facilement sans outils pour permettre un nettoyage en profondeur ou un changement de coloris rapide.

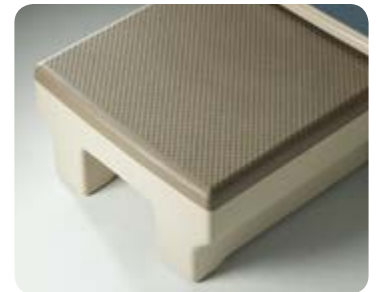

Marche-pieds surdimensionné - Notre marche-pieds est 40 % plus large que la norme industrielle. Les patients se sentent ainsi en sécurité lorsqu'ils montent sur la table.



Accessibilité et volume de stockage - Nos tiroirs bilatéraux permettent d'accéder aux fournitures d'un côté de la table comme de l'autre et de changer la configuration de votre salle d'examen à tout moment.

Accessoires pour plus de commodité



Poignées de maintien

Offrent aux patients une prise sûre pour accéder à la table d'examen ou pour se repositionner au cours de l'examen. Ces poignées de maintien peuvent être retirées facilement et sans outils pour donner au patient davantage d'accès.



Garniture plate

Offre une excellente surface de travail pour des soins orthopédiques, chiropratiques ou ostéopathiques.



Bras réglables

Ce système offre aux patients un support stable pour accéder à la table et un sentiment de sécurité pendant le positionnement. Les bras pivotent et se verrouillent dans l'une des trois positions possibles et peuvent être retirés facilement...sans utiliser d'outils.



Lampe d'examen à DEL Ritter 253

Flexible, compacte et adaptée à toute salle d'examen. Disponible en 3 types de montage.



Surface de travail pour PC

Offre un espace de travail à hauteur réglable pour une tablette PC, un dossier ou des fournitures et des instruments d'examen. Dimensions : Surface de 40,6 cm l x 32,5 P (16 1/2" W x 12 3/4" D) et hauteur réglable de 25,4 cm (10").



Cuvette urologique

Idéale durant les interventions urologiques pour l'évacuation des liquides et résidus.



Supports de genoux articulés

La conception unique d'articulation sphérique offre une plage maximale de réglage pour un support optimal des genoux et des jambes.



Supports de genoux standard

Soutiennent les jambes lors de longues interventions lorsque la fatigue est un facteur à prendre en compte ou lorsque le patient manque de force ou de contrôle des jambes. Réglez le support de genoux et de jambes en les faisant pivoter.



Chacun a le droit de bénéficier d'un accès égal aux soins de santé.

Pour bien prendre soin des patients, vous devez comprendre ce dont ils ont besoin aujourd'hui et ce dont ils auront besoin à l'avenir. Avec une population vieillissante qui ne cesse de croître, il se peut que vos patients aient besoin d'aide pour accéder à la table d'examen. Les tables d'examen électriques Ritter 222 et 223 Barrier-Free®, grâce à leur hauteur basse de 45,7 cm (18"), vous permettent de traiter tous les patients avec dignité, quels que soient leurs problèmes de mobilité. Aidez-les à s'aider eux-mêmes.

Ritter 204

C A R A C T É R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S



*Dessus de garniture douce au toucher -
Cette garniture peu coûteuse offre non
seulement une option douce au toucher
mais aussi fonctionnelle pour votre cabinet.*

Table d'examen manuelle Ritter 204

Caractéristiques

Garniture en mousse à densité variable

Peinture poudrée

Bâti en acier de calibre 18

Tiroirs en polystyrène monobloc

Couliasses de tiroir à roulements à bille

Capacité de poids de 226,8 kg (500 lb)

Les étrières sont standard



Assise avec renfort en acier pour soutenir les patients en position assise (et empêcher toute déformation et cassure du siège observées sur les modèles concurrents).



Les étrières sont conçus pour apporter un peu de confort aux patients en position de lithotomie.

Caractéristiques techniques

Hauteur avec garniture :

Dessus de garniture douce au toucher -
81,6 cm (32,13")

Dessus de garniture sans coutures -
84,2 cm (33,13")

Capacité de poids du patient :
226,8 kg (500 lb)

Prise électrique
(115 V CA, 5 A max.)
double, de qualité médicale,
côté gauche

Dessus de garniture douce au toucher :

77,5 cm l x 142,5 cm L
(30,5" W x 56" L)

Porte-rouleau de papier -
contient un rouleau de
papier de 53,3 cm x 12 cm
(21" x 4,75")

Longueur avec repose-pieds
déployé : 187,3 cm (73,75")

Dessus de garniture sans coutures :

72,4 cm l x 151,1 cm L
(28,5" W x 59,5" L)

Porte-rouleau de papier -
contient un rouleau de
papier de 53,3 cm x 8,9 cm
(21" x 3,5")

Longueur avec repose-pieds
déployé : 193 cm (76")

Options

Dessus de garniture sans coutures ou douce au toucher

Surélévation du bassin
(1,5 degré ou 7 degrés)

Chauffage de tiroir (45 W)

Accessoires

Supports de genoux

Support de lampe Welch
Allyn®

Cuvette urologique

Cuvette en acier inoxydable

Poignées de maintien

Surface de travail pour PC

Bras réglables

Garniture orthopédique
plate

Alimentation électrique


115 V CA, 50/60 Hz, 5 A
(avec prise)

115 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A
(avec chauffage de tiroir)

UL 60601-1 et norme de
sécurité CAN/CSA
601.1-M90

Marquage CE

Coloris de garniture Ritter :

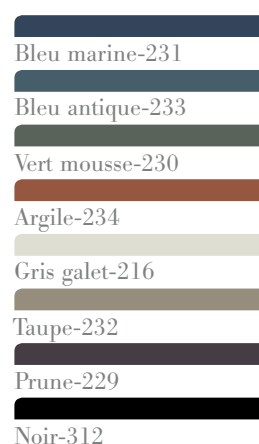

Conforme à CARB 93120.2 phase 2

Midmark est une société certifiée
ISO 13485 et ISO 9001.

Pour de plus amples informations
ou une démonstration, contactez
votre revendeur Ritter ou Midmark
ou contactez Midmark Corporation,
Versailles, Ohio.
Tél. : 1-800-MIDMARK
Fax : 1-800-365-8631
midmark.com

Ritter®
by MIDMARK

© Midmark Corporation 2005
Produits susceptibles de subir des modifications d'amélioration
sans préavis.
Litho aux États-Unis 007-0560-02 Rév. F1 (1/12)